

Bruksanvisning

Svenska

Walker



Bruksanvisning

Bästa användare

Tack för ditt val av produkt! Vi hoppas innerligt att du ska trivas med din Trionic Walker och att du ska uppleva många sköna turer, både i naturen och i stan.

I och med att du bestämt dig för en Trionic Walker har du öppnat upp för en rad nya möjligheter till fysisk aktivitet. Din Walker ger dig förbättrad tillgänglighet till olika miljöer och förhoppningsvis en förhöjd livskvalité.

Läs noga igenom bruksanvisningen före användning och beakta alla instruktioner, framför allt säkerhetsanvisningarna.

Trionic Walker 9er lämpar sig för både inomhus- och utomhusbruk.

Trionic Walker 12er och Walker 14er är anpassade för utomhusbruk.



Trionic Walker

Walker 9er är din perfekta rollator för både inomhus- och utomhusbruk. Med sina 9 tum stora hjul och extra mjuka däck erbjuder den dig hög komfort och väl balanserade köregenskaper. Den är lätt och kompakt för förvaring och transport.

Walker 12er är din pålitliga följeslagare när du promenerar utomhus. De 12 tum stora hjulen och de luftfyllda däcken garanterar en komfortabel körupplevelse, och den är din perfekta vardagsrollator för utomhusbruk.

Walker 14er är världens första rollator med 14 tum stora hjul. Vi på Trionic kallar den "Terminator" eftersom den utan problem rullar vidare där traditionella rollatorer blir stående. Alla Trionic Walkers är utrustade med synkronstyrning (patentsökt) som eliminerar problemen med wobblande och snedställda länkhjul.

Samtliga Trionic Walkers är testade och godkända enligt internationell standard ISO-11199-2:2005, för en maximal användarvikt på 150 kg.

Produkten

Tekniska Data

| | Walker 9er | Walker 12er | Walker 14er |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Min höjd: | 74 cm | 76 cm | 81 cm |
| Max höjd: | 94 cm | 96 cm | 100 cm |
| Bredd: | 66 cm | 69 cm | 69 cm |
| Längd: | 68 cm | 81 cm | 85 cm |
| Sitthöjd: | 62 cm | 62 cm | 62 cm |
| Sittbredd: | 43 cm | 46 cm | 46 cm |
| Hjulstorlek: | 9"/23 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm |
| Storlek hopfälld: | L68xB28xH82 cm | L81xB28xH88 cm | L85xB28xH90 cm |
| Storlek hopfälld utan hjul: | L61xB28xH74 cm | L67xB28xH76 cm | L67xB28xH76 cm |
| Vikt: | 9,7 kg | 10,9 kg | 11,9 kg |
| Vikt utan hjul: | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,9 kg |
| Max användarvikt: | 150 kg | 150 kg | 150 kg |

Säkerhet

- När du sitter på din Walker ska båda bromsarna vara låsta i parkeringsläge.
- Kontrollera att din Walker är låst i utfällt läge innan du går med den.
- Iaktta försiktighet i brant terräng och på sluttande underlag.
- Walkers stabilitet är testad med 5 kg last i korgen. Om du lastar mer än 5 kg är det mycket viktigt att lasten är jämnt fördelad i korgens botten.




Första gången

1. Fäll ut din Walker genom att dra handtagen från varandra.

2. Tryck de båda bakre hörnen av sitsen distinkt nedåt tills du hör ett svagt "klick".

3. Innan du använder din Walker, bekräfta att utfällningsmekanismen är säkert låst.

4. Ställ in rätt handtagshöjd genom att använda snabbkopplingarna, som beskrivet i kapitlet "Höjdinställning av handtag".

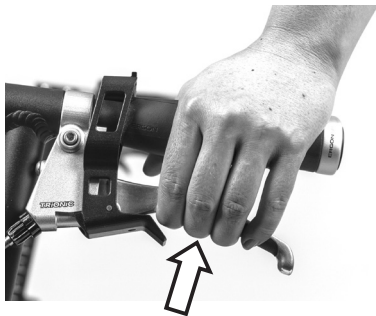

Färdbroms

Drag bromshandtaget uppåt för att bromsa när du går. Bromsa med båda bromsarna samtidigt.

För att frigöra parkeringsbromsen, bromsa som vid färdbromsning så släpper parkeringspärren.




Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen kan aktiveras på 3 olika sätt:


Alternativ 1:

Tryck den undre röda parkeringsarmen nedåt med pekfingeret, medan du samtidigt drar bromshandtaget uppåt. Säkerställ att parkeringsbromsen är låst, och att Velopeden inte rullar.

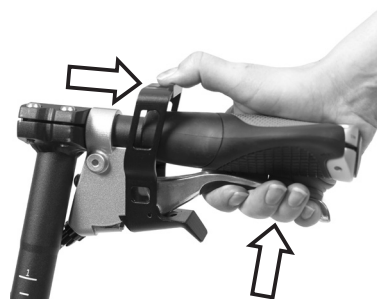



Alternativ 2:

Dra den övre röda parkeringsarmen bakåt med tummen, medan du samtidigt drar bromshandtaget uppåt. Säkerställ att parkeringsbromsen är låst, och att Velopeden inte rullar.

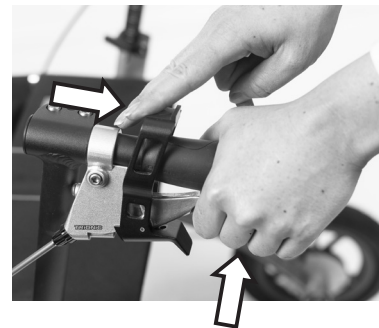

Alternativ 3:

Använd båda händerna. Dra den övre röda parkeringsarmen bakåt med ena handen, medan du samtidigt drar bromshandtaget uppåt med din andra hand. Säkerställ att parkeringsbromsen är låst, och att Velopeden inte rullar.

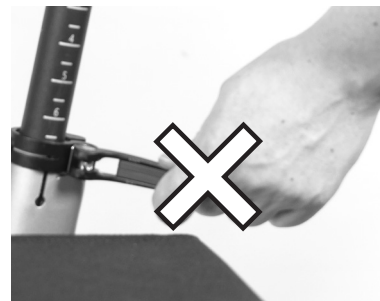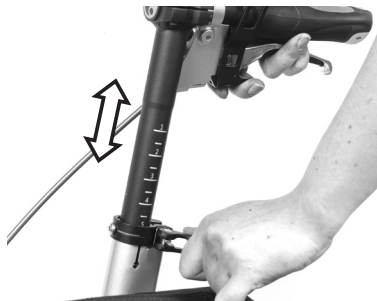

Höjdinställning av handtag

1. Lossa snabbkopplingen just ovanför sitsen genom att vika ut den horisontellt.

2. Ställ in rätt grepphöjd genom att höja/sänka handtaget.

3. Lås handtaget på vald höjd genom att låsa/vika tillbaka snabbkopplingen.

4. OBS: Använd inte snabbkopplingen som en vingmutter eller skruv.



Inställning av handtagsvinkel

Vinkeln på handtagen kan ställas in så att du får en komfortabel handposition och ett optimalt stöd.

1. Lossa den bakre skruven på handtaget med en 4 mm insexnyckel.



2. Vrid handtaget till önskad position, och lås handtaget genom att dra åt skruven igen.



Hopfällning

1. Ta tag i sitshandtaget och dra det uppåt, och din Walker fälls ihop.



2. Skjut de båda handtaget mot varandra.



Utfällning

1. Fäll ut din Walker genom att dra handtagen från varandra.




2. Tryck de båda bakre hörnen av sitsen distinkt nedåt tills du hör ett svagt "klick".



3. Innan du använder din Walker, bekräfta att utfällningsmekanismen är säkert låst.

Sits

Lås alltid båda parkeringsbromsarna innan du använder sitsen.

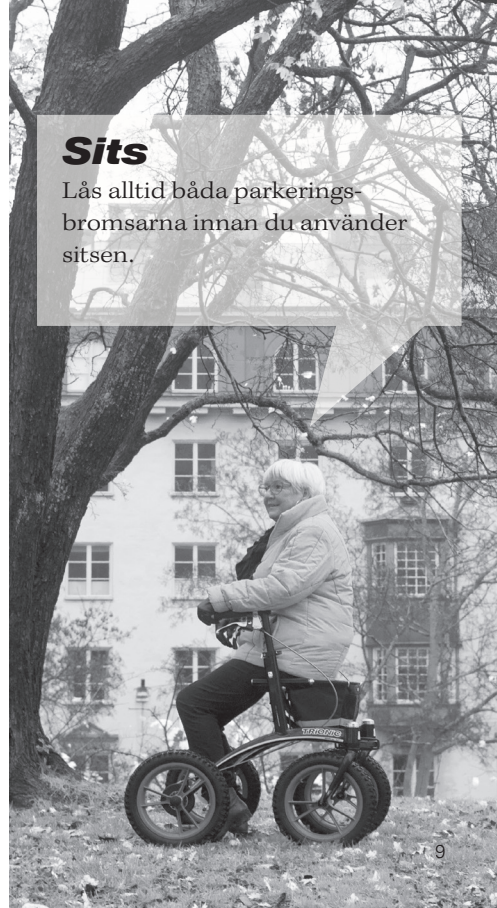



Ta av framhjulen

1. Lossa snabbkopplingen på framhjulet genom att vika ut den.

2. Lossa muttern på insidan av gaffeln lite, så att hjulet kan tas ur gaffeln.

3. Ta bort hjulet från gaffeln.

4. OBS: Använd inte snabbkopplingen som en vingmutter eller skruv.




Montera framhjulen

1. Montera hjulet i gaffeln, med snabbkopplingen på utsidan av rollatorn.

2. Skruva åt muttern på insidan av gaffeln, så att snabbkopplingen kan låsas ordentligt.

3. Lås snabbkopplingen på framhjulet genom att vika den inåt. Säkerställ att hjulet sitter fast ordentligt. Idealiskt skall snabbkopplingsarmen vara positionerad bakom gaffeln, sett i färdriktningen.

4. OBS: Använd inte snabbkopplingen som en vingmutter eller skruv.

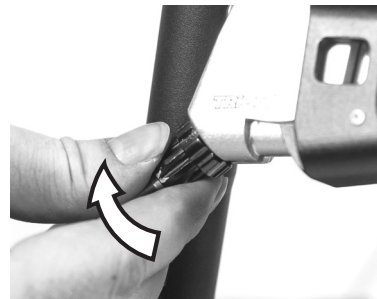

Ta av / montera bakhjulen

1. Tryck på stålknappen vid hjulets mitt och du kan dra av hjulet från hjulaxeln.
2. För att montera hjulet igen, tryck in stålknappen och skjut på hjulet på hjulaxeln.
3. Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt genom att dra i det fram och tillbaka i sidled.

Justering av bromsverkan

1. Vid dålig bromsverkan, skruva ut justerskruven på respektive bromshandtag (moturs) och lås sedan justerskruven genom att skruva in låsmuttern mot handtaget (medurs).

person ansvarig för service av din Trionic Walker.

Om bromsverkan fortfarande är bristfällig, kontakta Trionic, din återförsäljare eller auktoriserad

Säkerhetsanvisningar

Kontrollera att din Trionic Walker fungerar perfekt innan du använder den:

- Kontrollera bromsverkan samt parkeringsbroms.
- Se till att den är ordentligt utfälld.
- Kontrollera att handtagen har rätt höjd samt att de är låsta ordentligt.
- Användarens maxvikt får ej överstiga 150 kg.
- Använd inte Trionic Walker som rullstol eller för persontransport.
- Trionic Walker är avsedd att användas som gånghjälpmedel och är främst till för att erbjuda användaren stöd vid fysisk förflyttning.
- För att säkerställa produktens funktioner rekommenderas en årlig kontroll av din Walker via ett av Trionic eller distributör godkänt serviceställe.
- En defekt Walker bör inte användas.

Skötselanvisning

För att upprätthålla funktion och säkerhet bör du regelbundet se till att nedanstående åtgärder utföres:

- Rengör din Walker med vanligt diskmedel, vatten och en disktrasa. Torka den torr.
- Håll hjulen rena med diskmedel, vatten och en plastborste.
- Kontrollera att skruvar och reglage är ordentligt åtdragna.
- Om din Walker inte är i fullgod kondition – tag genast kontakt med din återförsäljare eller auktoriserad person ansvarig för service av Trionic Walker.

OBS! Defekt Walker bör inte användas.

För ingrepp på produkten (anpassningar, bristfälliga reparationer), utan Trionics medgivande, ansvaras ej.



Garanti

Trionic Walker inkluderar 10 års garanti, undantaget delar som är utsatta för normalt slitage (däck, slangar, bromskablar, bromskabelhöljen, handtag och textildelar). Garantin är giltig fr.o.m. köpdatum, och inkluderar bara originaldelar från Trionic.

Serienummer


Datum/Stämpel/Underskrift

CE - Trionic Sverige AB försäkrar att ovanstående produkt uppfyller tillämpliga i lag stadgade krav (1993:584) om medicintekniska produkter samt krav i föreskrifterna (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter. Produkten uppfyller härigenom kraven i EG:s direktiv angående medicintekniska produkter, 93/42/EEG.

Etikett

Trionic Veloped är testad och godkänd enligt föreskriven internationell standard för gånghjälpmedel: ISO 11199-2:2005 "Walking aids manipulated by both arms".

Användarens vikt får ej överstiga 150 kg.

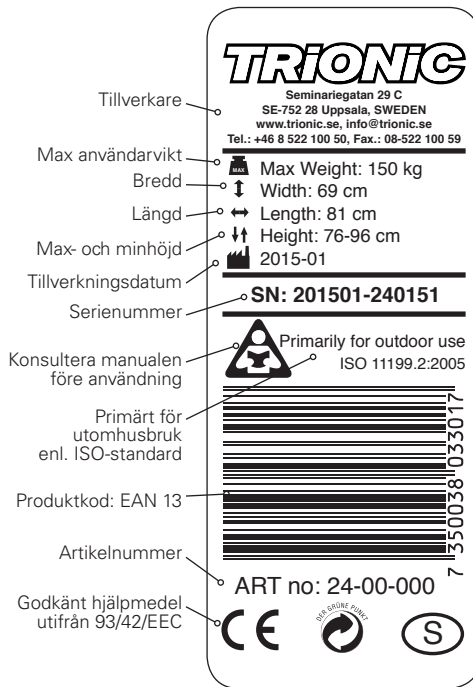

Miljövänlighet

Trionic Walker är tillverkad så att den har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt under sin livscykel. När produkten tjänat ut kan den skrotas och delarna tillvaratas för återvinning.

- Vid återvinning separeras produktens aluminiumkomponenter från övriga detaljer. Delarna sorteras efter metall, plast och blandmaterial.
- Produkten består till största del av aluminium och stål.
- Exempel på komponenter som består av blandmaterial är hjul och slangar.
- Eftersom olika kommuner/återvinningsföretag hanterar återvinningsmaterial på olika sätt är det lämpligast att i tveksamma fall kontakta din kommun.

Trionic Sverige AB är anslutet till REPA, som är ett rikstäckande system för återvinning av förpackningar.



Trionic Sverige AB

Seminariegatan 29 C
SE-752 28 Uppsala
SVERIGE

Web: trionicwalker.se
Shop: www.trionic.se

E-mail: info@trionic.se

Tel: +46 -(0)8 522 100 50
Fax: +46 -(0)8 522 100 59

Corp.ID: 556698-1527. VAT Reg. No SE556698152701